

## Biliblanket Instrucciones


Cuando un infante tiene ictericia, necesita una cobija con luz que se llama “Biliblanket”. Ésta se usa constantemente en casa, le va a ayudar al bebe para eliminar la química en el cuerpo que le causa la ictericia (bilirrubina).

### Recibiendo la “Biliblanket”

Apria Healthcare es la compañía que entrega la cobija a la casa. Les llamarán para confirmar la orden.

### Usando la “Biliblanket”

1. Adjunte el tubo a la entrada circular de la máquina, retorciendo para asegurar bien. Adjunte el cordón de electricidad a la máquina.
2. Cubra la almohadilla con la tela en el paquete. Poner el lado blanco de tela en el lado claro de la almohadilla, el lado donde no hay algo escrito.
3. Poner la piel de la espalda (solo la espalda, no la cabeza) del bebe encima de la tela y cobija. El tubo irá en la dirección de las piernas del bebe.
4. Para asegurar la cobija, puede poner las solapas alrededor del bebe y usar la cinta adhesiva con la cobija o quitar las solapas si no quiere usarlas.
5. Use otra cobija para poner alrededor del bebe, asegurando que la “Biliblanket” esté en contacto con la piel del bebe. Tapar la “Biliblanket” para que no se vea la luz. Si quiere poner la piel del bebe en contacto contigo, asegure de cubrir al bebe y a usted con otra cobija para evitar que la luz les de en sus ojos.
6. Enchufe la máquina y préndala.

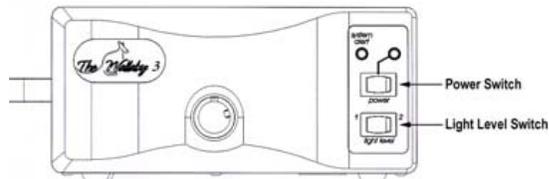

Para el Wallaby 3 (la foto de arriba), pulse el botón de la corriente (Power Switch) “On” y el nivel de luz (Light Level) a 2.



Para la Biliblanket Plus (foto de arriba), pulse el botón de la corriente atrás y cambia el nivel de luz a “maximum”.



Para la BiliTx (foto a la izquierda), apreté y sostenga el botón gris en el cilindro hasta que vea una luz azul.

7. Quite la cobija de luz cuando cambie los pañales del bebe o para darle un baño. Favor de tener al bebe el mas tiempo posible con la luz en contacto de la piel para mejorar el problema.

### Reportando Problemas

1. Si pasa 2 horas después que ordenamos la cobija y no ha oído de Apria Healthcare, favor de llamar a Apria (**510-346-4000**). *No tienen opciones en español*. Si no hay alguien disponible para llamar en ingles o no puede resolver el problema, llame a nuestra línea: **510-675-4050** (en Hayward) o **510-795-3050** (en Fremont).
2. Si no llega la cobija, mantenga la calma. No es emergencia, y podemos resolver la situación el próximo día.
3. Si hay partes que faltan, llame a Apria.

### Devolviendo la “Biliblanket”

Después que no necesite la cobija, llame a Apria (510-346-4000) y ellos vendrán a su casa para recogerla.